



Modèles d'incubateurs réfrigérés Thermo Scientific RI-150 et RI-250

Une vaste plage de températures pour vos applications

De l'incubation au stockage d'échantillons dans le domaine des sciences de la vie, en passant par l'analyse DBO (demande biochimique en oxygène) dans les stations d'épuration, il est essentiel d'assurer un réglage précis de la température. Conçus pour s'adapter à votre budget, les incubateurs réfrigérés Thermo Scientific™ sont des produits de qualité présentant des caractéristiques de précision pour des résultats homogènes et des performances supérieures.

Lorsque votre application nécessite des incubateurs réfrigérés, envisagez les modèles d'incubateurs réfrigérés Thermo Scientific RI-150 et RI-250.

Offrant une plage de températures de 4 à 60°C, nos incubateurs réfrigérés sont conçus pour atteindre les températures d'application précises dont vous avez besoin pour obtenir des résultats reproductibles. Nos incubateurs sont proposés en deux versions : un modèle sur paillasse (RI-150) ou un grand modèle au sol (RI-250).




Modèle sur paillasse
RI-150



Modèle au sol
RI-250

Exemples d'application

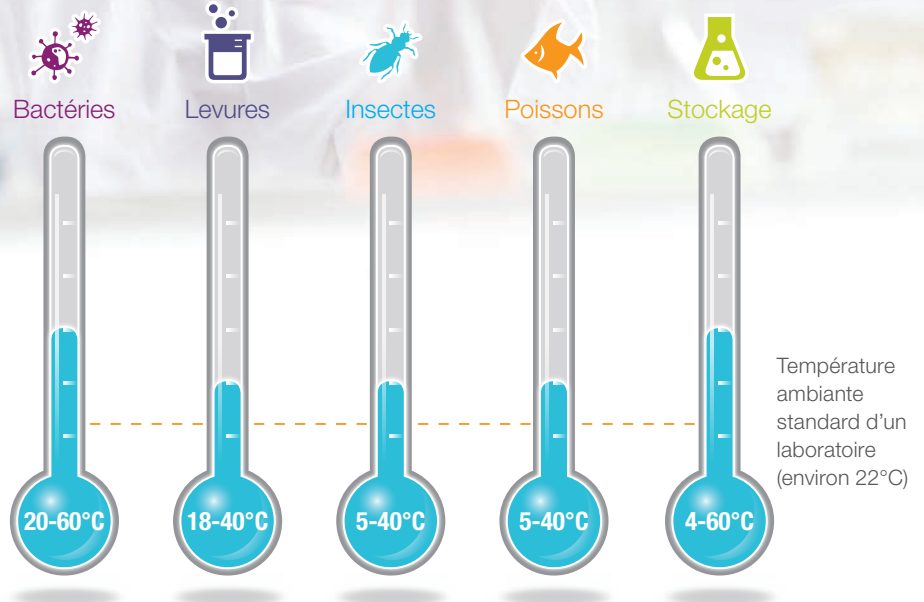

Les incubateurs réfrigérés Thermo Scientific offrent une température optimale pour les applications nécessitant des températures stables au-dessus ou au-dessous de la température ambiante, notamment l'incubation de bactéries, de levures, d'insectes ou de poissons, et le stockage à une température précise. Ils sont aussi idéals pour les applications d'incubation standard entre 30 et 37°C dans les environnements chauds.

Incubateurs réfrigérés Thermo Scientific

Les incubateurs réfrigérés Thermo Scientific offrent des caractéristiques et une gamme d'accessoires complémentaires conçus pour permettre une utilisation facile et assurer la protection des échantillons de valeur.

Caractéristiques et avantages





Caractéristiques des produits et informations de commande

Modèle	RI-150 (modèle sur paillasse)	RI-250 (modèle au sol)
Référence	RI-150EU	RI-250EU
Volume de la chambre	150 L	250 L
Plage de températures	+4 à 60°C	
Écart de température temporel*	À +20°C : ≤ ±0,3, à 37°C : ≤ ±0,3	
Écart de température spatial*	À 20°C : ≤ ±0,8, à 37°C : ≤ ±0,7	À 20°C : ≤ ±0,8, à 37°C : ≤ ±1,0
Dimensions intérieures (L x P x H)	550 x 450 x 615 mm	550 x 450 x 1 015 mm
Dimensions extérieures (L x P x H)**	652 x 605 x 1 050** mm	652 x 605 x 1 450** mm
Surface d'encombrement	0,39 m ²	
Nombre d'étagères fournies / max.	2 / 4	3 / 5
Dimensions des étagères (L x P)	545 x 445 mm	
Capacité de charge par étagère	15 kg	
Poids de l'unité	95 kg	115 kg
Poids emballé	115 kg	135 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz, fiche UE Schuko, fiche R.U. et fiche Australie fournies	
Puissance nominale / courant max.	1150 W / 5,0 A	
Réfrigérant***	R134a, 0.32 kg	R134a, 0.35 kg
	GWP : 1420	
	CO2e : 0.45 t	CO2e : 0.50 t


*Mesure selon DIN12880, à une température ambiante de 22°C ±3°C

**La hauteur tient compte de la hauteur des pieds/roulettes

***Ce dispositif satisfait le règlement EU-F-Gas No. 517/2014 et contient des gaz à effet de serre fluorés dotés de systèmes hermétiquement scellés.

Accessoires

Étagères	
Référence	RISHelf
Description	Étagère perforée en acier inoxydable (blanche, laquée) avec 4 supports d'étagère
Dimensions	545 x 445 mm
Poids emballé	2 kg
À utiliser avec les références	RI-150EU et RI-250EU

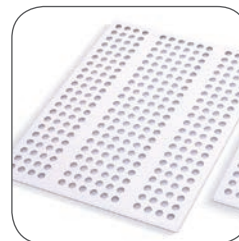

Étagère blanche perforée en acier inoxydable



Supports d'étagère inclus

CE RoHS, China RoHS

Les produits sont certifiés CE et sont conformes à la directive RoHS.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur thermofisher.com/refrigeratedincubators

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Viton est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers L.L.C. Les autres marques déposées sont des marques commerciales ou déposées de Thermo Fisher Scientific Inc et de ses filiales. Les caractéristiques, conditions et tarifs sont susceptibles d'être modifiés. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à votre distributeur local.

Australie +61 39757 4300
Autriche +43 1 801 40 0
Belgique +32 9 272 54 82
Chine +800 810 5118 ou +400 650 5118
France +33 2 2803 2180
Allemagne, appel gratuit (local)
 0800 1 536 376
Allemagne (international)
 +49 6184 90 6321

Inde (appel gratuit) 1800 22 8374
Inde +91 22 6716 2200
Italie +39 02 95059 552
Japon +81 3 5826 1616
Pays-Bas +31 76 579 55 55
Nouvelle-Zélande +64 9 980 6700
Pays nordiques / baltes / CEI
 +358 10 329 2200

Russie +7 812 703 42 15
Espagne / Portugal +34 93 223 09 18
Suisse +41 44 454 12 12
Royaume-Uni / Irlande +44 870 609 9203
États-Unis / Canada +1 866 984 3766
Autres pays asiatiques +852 3107 7600
Autres pays +49 6184 90 6000

ThermoFisher
 SCIENTIFIC